

# Crianças Haste Aprendizagem Inseto Observação Observação Crianças Microscópio Educacional Microscópio 1000X WiFi Bio Bio Microscópio

## Descrição do produto



\* M1 é um microscópio inteligente que possui várias interfaces: WiFi e tipo c. Também pode ser conectado com telefone, almofada, laptop e PC, mostrando imagens diretamente sem usar os olhos. É fácil fotografar e vídeo através do aplicativo e salvar as imagens. \* M1 não tem imagens nítidas e claras, mas também conveniente de tomar devido à sua dedalanidade. Tem a fonte de luz LED refletida, e a base possui fontes de luz ajustáveis de 7 cores sem força, de violeta a branco, e você pode ligar livremente a cor clara transmitida. Elimina a fase de tingimento artificial para seções transparentes e translúcidas. \* Upload através da interface Type-C, carregando sem o cabo de alimentação. Apoie o uso do carregamento do PAL de carga diretamente, a bateria de lítio de alta densidade de 2700 mAh, a base pode ser usada para durar até 10 horas e o microscópio monômero pode ser usado separadamente até 2 horas. \* Este microscópio inteligente pode ser usado amplamente em vários campos: inspeção de PCB, assistir e reparo do telefone, identificação de jóias, aprendizagem e demonstração, testes têxteis, detecção de pele, inspeção de impressão, controle de dinheiro etc.

## Especificações

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| garantia              | 1 ano                |
| Suporte personalizado | OEM, ODM.            |
| Teoria                | Microscópio de vídeo |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| DrawTube.                  | Monocular                           |
| Ampliação total:           | 1x ~ 1000x.                         |
| Material:                  | ABS, liga de alumínio, pmma         |
| Bateria do microscópio:    | 700mAh.                             |
| Suporte básico da bateria: | 2000mAh.                            |
| Interface:                 | WiFi, Tipo-C, Janela, Android       |
| Iluminação refletida:      | Fonte de luz LED.                   |
| Iluminação básica:         | Fonte de luz de 7 cores transmitida |
| Fonte de luz:              | 8 luzes LED                         |
| Característica:            | Microscópio sem fio.                |
| Certificação:              | Alcance, Rohs, CE, FCC, KC, PSE     |
| Peso bruto                 | 2.7kgs.                             |
| Dimensão                   | 25 * 25,5 * 21 cm                   |





Bee wings



Ant



Bee leg



Longitudinal section  
of corn seed




Slice ovary  
of lily



Longitudinal section  
of pumpkin stalks



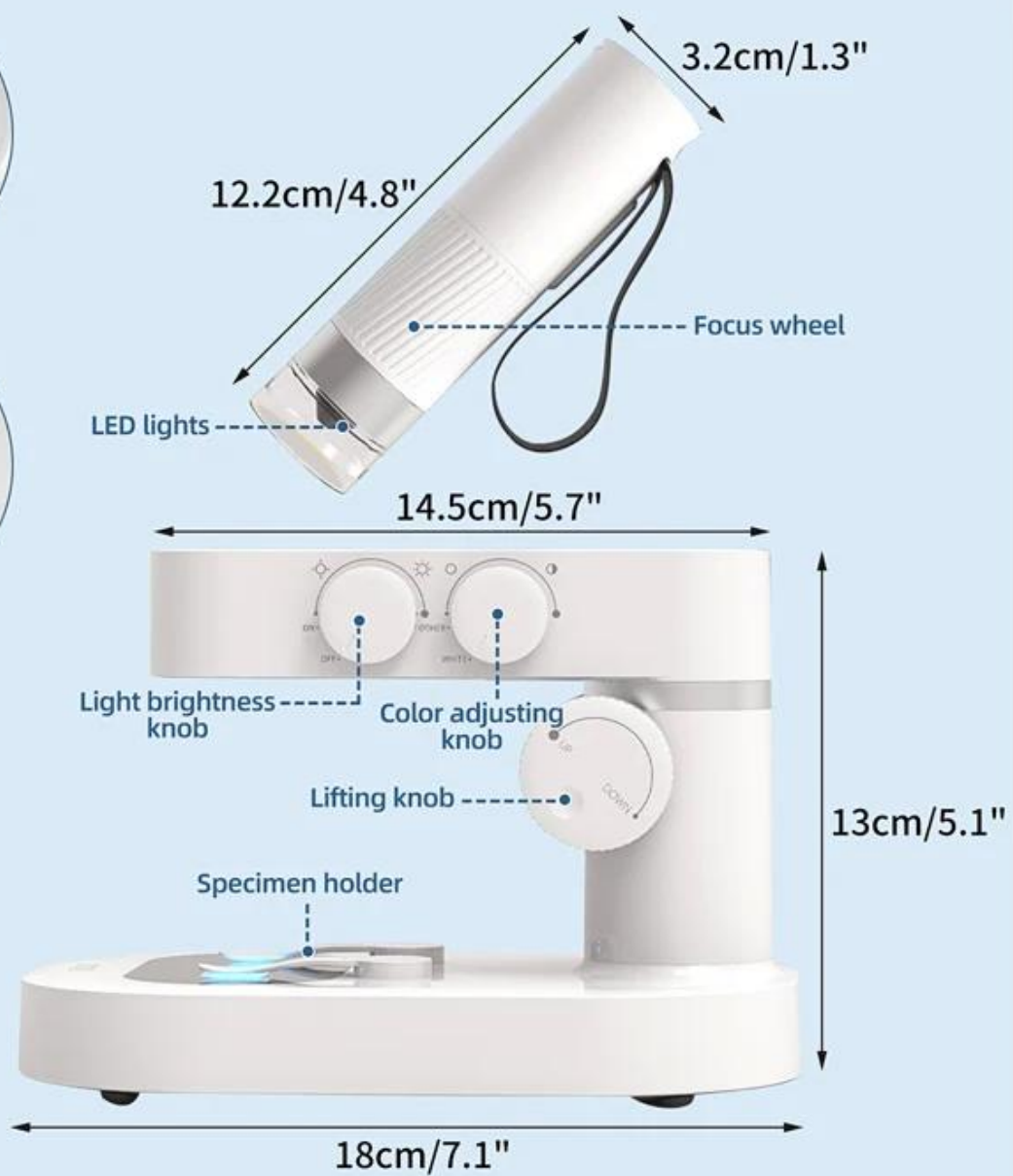







# How to Operate on



## For Win10

Unpack and pick out microscope, connect the microscope and host computer via USB cable, search Camera in Windows for find it and click on.

(Notice: please see user manual for details)

## For Win7 / Win8 / Mac

**Step 1.** Install software "HiView"

**Step 2.** Connect the microscope to PC via the USB cable, double-click to open the software

**Step 3.** Click "Device" in the menu bar, and then click "Open", select the microscope name "\*\*\*\*\*", and click "Open" to enter the preview screen

# How to Use on Cellphone



Download the APP.



Long press the power button to turn on the microscope.



Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi\_camera\_wifi30\_xxxx" and connect it.




Then you can click the APP and use





## How to Use on Cellphone

 (Notice: please see user manual for details)

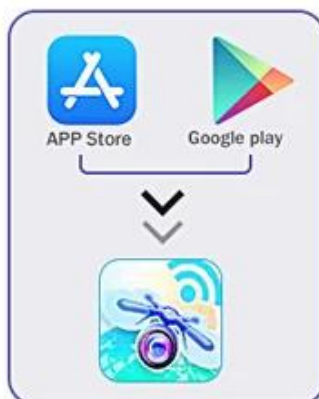

**Step 1.** Download the APP.



**Step 2.** Long press the power button to turn on the microscope.



**Step 3.** Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi\_camera\_wifi30\_xxx" and connect it.



**Step 4.** Then you can click the APP

# Wide Compatibility

Wi-Fi and USB 2 in 1 connection



iPhone



Android



Tablet



Mac




Windows



Wi-Fi



USB cable

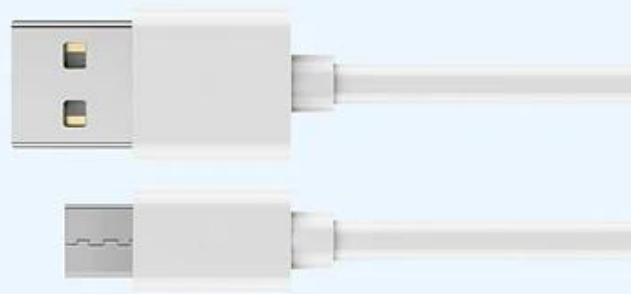



Embalagem e entrega

