

Enfants souches d'apprentissage des insectes Preciment Observation Microscope éducatif pour enfants 1000x Wifi Bio Bio Microscope

Description du produit



* M1 est un microscope intelligent qui dispose de plusieurs interfaces: wifi et de type c. Il peut également être connecté à un téléphone, tapis, ordinateur portable et PC, montrant des images directement sans utiliser les yeux. Il est facile de photo et vidéo via l'application et enregistrer les images. * M1 n'a pas des images nettes et claires, mais aussi pratique de prendre en raison de sa dedalanity. Il a la source de lumière LED réfléchie, et la base comporte des sources de lumière réglables 7-couleur sans force, du violet au blanc, et on peut librement tourner sur la couleur de la lumière transmise. Élimine la phase de teinture artificielle pour des sections transparentes et translucides. * Upload via l'interface de type C, le chargement sans le cordon d'alimentation. Appuyer l'utilisation de la charge de chargement Pal directement, la pile au lithium à haute densité 2700 mAh, la base peut être utilisée pour durer jusqu'à 10 heures et le microscope monomère peut être utilisé séparément jusqu'à 2 heures. * Ce microscope intelligent peut être largement utilisé dans divers domaines: inspection des PCB, montre et réparation de téléphone, l'identification de bijoux, d'apprentissage et de démonstration, des tests textiles, la détection de la peau, l'inspection d'impression, le contrôle de l'argent, etc.

Caractéristiques

garantie	1 année
soutien personnalisé	OEM, ODM.

Théorie	microscope vidéo
Tube de traction.	Monoculaire
grossissement total:	1x ~ 1000x.
Matériel:	ABS, alliage d'aluminium, PMMA
batterie microscope:	700mAh.
support de la batterie de base:	2000mAh.
Interface:	Wifi, de type C, Fenêtre, Android
éclairage réfléchi:	source lumineuse à DEL.
éclairage de base:	7 couleurs source lumineuse transmise
Source de lumière:	8 LED
Caractéristique:	microscope sans fil.
certification:	Reach, RoHS, CE, FCC, KC, PSE
Poids brut	2.7kgs.
Dimension	25 * 25.5 * 21 cm





Explore the Micro World Around You



Bee wings



Ant



Bee leg



Longitudinal section
of corn seed



Slice ovary
of lily



Longitudinal section
of pumpkin stalks









How to Operate on



For Win10

Unpack and pick out microscope, connect the microscope and host computer via USB cable, search Camera in Windows for find it and click on.

(Notice: please see user manual for details)

For Win7 / Win8 / Mac

Step 1. Install software "HiView"

Step 2. Connect the microscope to PC via the USB cable, double-click to open the software

Step 3. Click "Device" in the menu bar, and then click "Open", select the microscope name "*****", and click "Open" to enter the preview screen

How to Use on Cellphone



Download the APP.



Long press the power button to turn on the microscope.



Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi_camera_wifi30_xxxx" and connect it.




Then you can click the APP and use



How to Use on Cellphone

 (Notice: please see user manual for details)

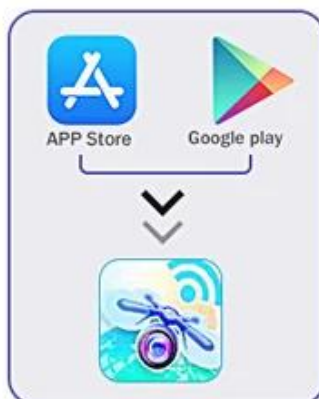

Step 1. Download the APP.



Step 2. Long press the power button to turn on the microscope.



Step 3. Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi_camera_wifi30_xxx" and connect it.



Step 4. Then you can click the APP

Wide Compatibility

Wi-Fi and USB 2 in 1 connection



iPhone



Android



Tablet



Mac




Windows



Wi-Fi



USB cable

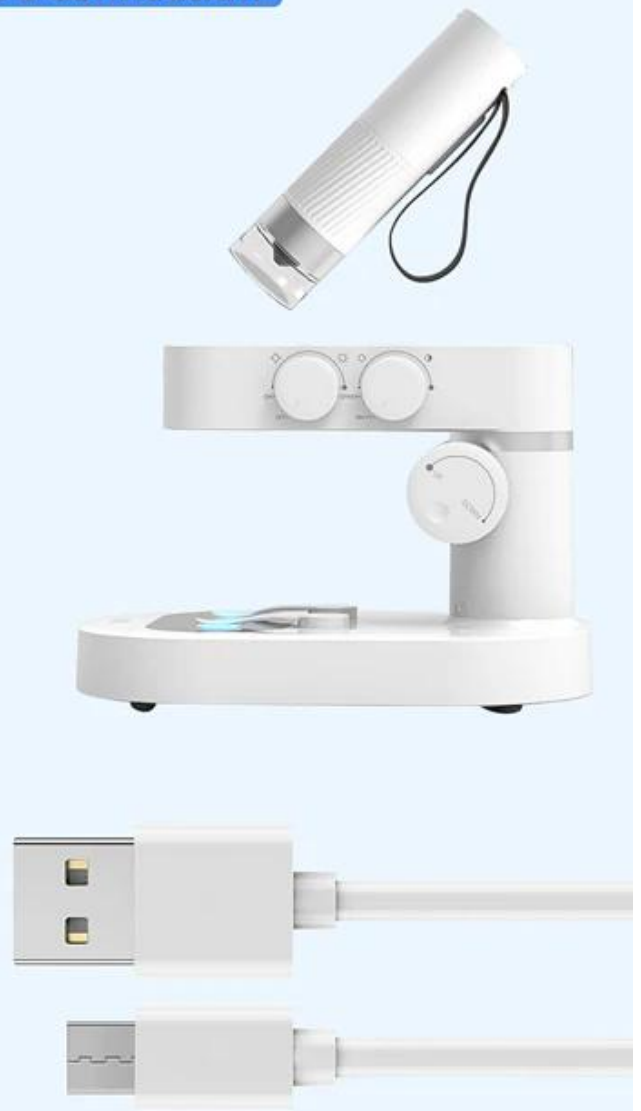



Emballage et livraison

