

Παιδικά στελέχη Μάθηση εντόμων προκατειλημμένη παρατήρηση μικροσκοπίου μικροσκοπίου παιδιών εκπαιδευτικό μικροσκόπιο 1000x wifi βιολογικό μικροσκόπιο

Περιγραφή προϊόντος



* Το M1 είναι ένα ευφύες μικροσκόπιο που έχει πολλαπλές διεπαφές: wifi και type-c. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με το τηλέφωνο, το μαξιλάρι, το φορητό υπολογιστή και τον υπολογιστή, να δείχνει εικόνες άμεσα χωρίς να χρησιμοποιεί τα μάτια. Είναι εύκολο στη φωτογραφία και το βίντεο μέσω της εφαρμογής και αποθηκεύστε τις εικόνες. * Το M1 δεν έχει αιχμηρές και σαφείς εικόνες, αλλά και βολικό να ληφθεί υπόψη λόγω της αποκοπής του. Έχει την ανακλώμενη πηγή LED LED και η βάση έχει 7-χρώμα ρυθμιζόμενες πηγές φωτισμού χωρίς δύναμη, από ιώδες έως λευκό, και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ελεύθερα το φωτεινό χρώμα που μεταδίδεται. Εξαλείφει τη φάση της τεχνητής βαφής για διαφανή και ημιδιαφανή τμήματα. * Μεταφορτώστε τη διεπαφή τύπου C, φόρτωση χωρίς το καλώδιο τροφοδοσίας. Υποστηρίξτε τη χρήση της φόρτωσης φόρτωσης PAL φόρτισης απευθείας, η μπαταρία λιθίου των 2700 mAh υψηλής πυκνότητας, η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαρκέσει έως και 10 ώρες και το μικροσκόπιο μονομερούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά μέχρι 2 ώρες. * Αυτό το έξυπνο μικροσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορα πεδία: επιθεώρηση PCB, ρολόι και επισκευή τηλεφώνου, αναγνώριση κοσμημάτων, μάθηση και επίδειξη, δοκιμές κλωστοϋφαντουργίας, ανίχνευση δέρματος, έλεγχος των χρημάτων κλπ.

Προδιαγραφές

Εγγύηση	1 χρόνος
Προσαρμοσμένη υποστήριξη	OEM, ODM.
Θεωρία	Μικροσκόπιο βίντεο
Το ημερολόγιο.	Μονόφθαλμος
Συνολική μεγέθυνση:	1x ~ 1000x.
Υλικό:	ABS, κράμα αλουμινίου, PMMA
Μπαταρία μικροσκοπίου:	700mah.
Βασική βάση μπαταρίας:	2000mah.
Διεπαφή:	WiFi, τύπου C, παράθυρο, Android
Αντανάκλαση φωτισμού:	LED φωτεινή πηγή.
Βασικός φωτισμός:	7 χρώματα φωτεινής πηγής που μεταδίδονται
Πηγή φωτός:	8 φώτα LED
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:	Ασύρματο μικροσκόπιο.
Πιστοποίηση:	REACH, ROHS, CE, FCC, KC, PSE
Μεικτό βάρος	2.7kgs.
Διάσταση	25 * 25.5 * 21 cm





Explore the Micro World Around You



Bee wings



Ant



Bee leg



Longitudinal section
of corn seed



Slice ovary
of lily



Longitudinal section
of pumpkin stalks









How to Operate on



For Win10

Unpack and pick out microscope, connect the microscope and host computer via USB cable, search Camera in Windows for find it and click on.

(Notice: please see user manual for details)

For Win7 / Win8 / Mac

Step 1. Install software "HiView"

Step 2. Connect the microscope to PC via the USB cable, double-click to open the software

Step 3. Click "Device" in the menu bar, and then click "Open", select the microscope name "*****", and click "Open" to enter the preview screen

How to Use on Cellphone



Download the APP.



Long press the power button to turn on the microscope.



Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi_camera_wifi30_xxxx" and connect it.




Then you can click the APP and use



How to Use on Cellphone

 (Notice: please see user manual for details)

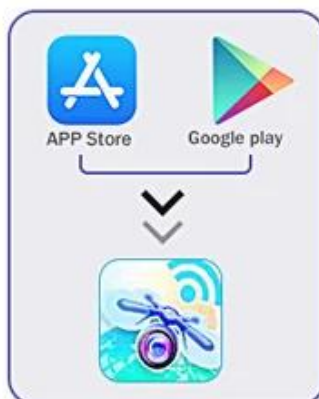

Step 1. Download the APP.



Step 2. Long press the power button to turn on the microscope.



Step 3. Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi_camera_wifi30_xxx" and connect it.



Step 4. Then you can click the APP

Wide Compatibility

Wi-Fi and USB 2 in 1 connection



iPhone



Android



Tablet



Mac




Windows



Wi-Fi



USB cable

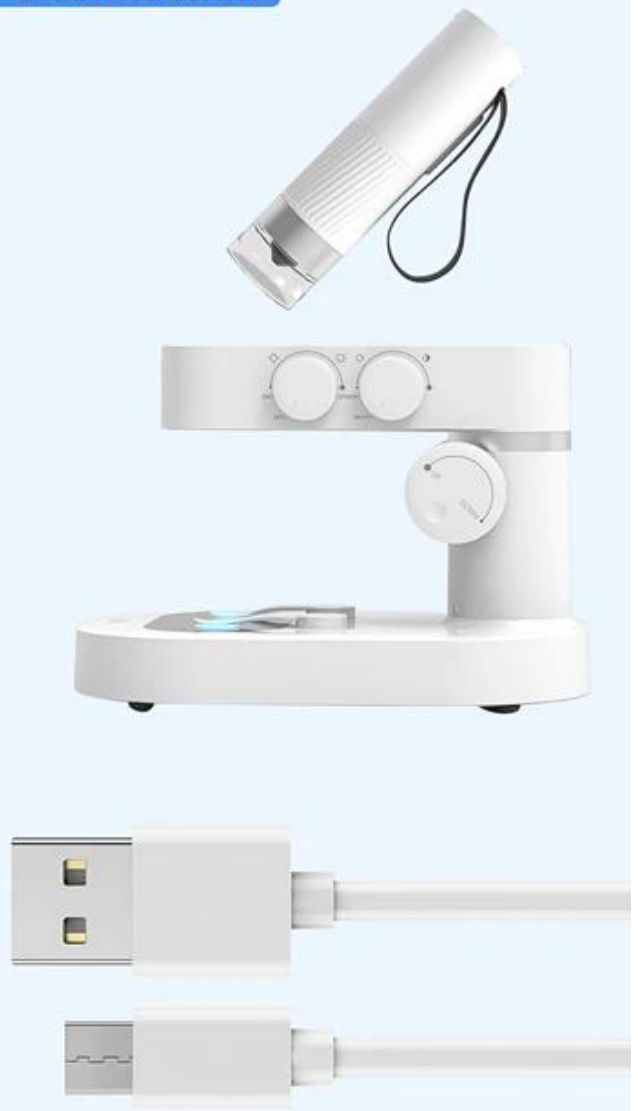



Συσκευασία και παράδοση

