

Дети обучающие стебля насекомых Насекомые Предоставление микроскоп детский образовательный микроскоп 1000x микроскоп WiFi Bio Bio

Описание продукта



* M1 - это интеллектуальный микроскоп, который имеет несколько интерфейсов: WiFi и Type-C. Он также может быть подключен по телефону, прокладке, ноутбуку и ПК, показывая изображения непосредственно без использования глаз. Это легко фотографировать и видео через приложение и сохраняет изображения. * M1 имеет не только острые и чистые образы, но также удобно принимать из-за его detalabilità. Он отражается в источнике светодиода света, и основание имеет источники света, регулируемые до 7 цветов без силы, от фиолетового до белого, и вы можете свободно переключать цвет передаваемого света внизу. Удалить фазу искусственного красителя для прозрачных и полупрозрачных разделов. * Загрузить через интерфейс типа C, загрузка без шнура питания. Поддерживая использование PAL Загрузка нагрузки напрямую, литиевая батарея высокой плотности до 2700 мАч, основание можно использовать в последнюю до 10 часов, а микроскоп мономера может использоваться отдельно до 2 часов. * Этот интеллектуальный микроскоп может быть широко использоваться в различных областях: проверка печатной платы, посмотреть и ремонт телефона, идентификация ювелирных изделий, обучения и демонстрации, текстильное тестирование, обнаружение кожи, проверка печати, контроль денег и т. Д.

Характеристики

Гарантия	1 год
----------	-------

Персонализированная поддержка	ОЕМ, ODM.
Теория	видео микроскоп
Unditube.	Монокуляр
Общее увеличение:	1x ~ 1000x.
Материал:	АБС, алюминиевый сплав, ПММА
Аккумуляторный микроскоп:	700 мАч.
Стенд базовая батарея:	2000 мАч.
Интерфейс:	WiFi, Type-C, окно, Android
Отраженное освещение:	Светодиодный источник света.
Основное освещение:	7 цветов передается источник света
Источник света:	8 светодиодных фонарей
Характеристика:	Беспроводной микроскоп.
Сертификация:	Добраться, ROHS, CE, FCC, KC, PSE
Общий вес	2,7 кгс.
Измерение	25 * 25,5 * 21 см





Explore the Micro World Around You



Bee wings



Ant



Bee leg



Longitudinal section
of corn seed



Slice ovary
of lily



Longitudinal section
of pumpkin stalks









How to Operate on



For Win10

Unpack and pick out microscope, connect the microscope and host computer via USB cable, search Camera in Windows for find it and click on.

(Notice: please see user manual for details)

For Win7 / Win8 / Mac

Step 1. Install software "HiView"

Step 2. Connect the microscope to PC via the USB cable, double-click to open the software

Step 3. Click "Device" in the menu bar, and then click "Open", select the microscope name "*****", and click "Open" to enter the preview screen

How to Use on Cellphone



Download the APP.



Long press the power button to turn on the microscope.



Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi_camera_wifi30_****" and connect it.




Then you can click the APP and use



How to Use on Cellphone

 (Notice: please see user manual for details)

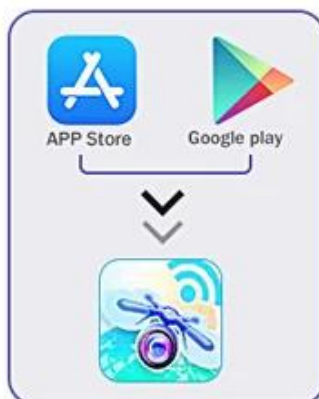

Step 1. Download the APP.



Step 2. Long press the power button to turn on the microscope.



Step 3. Turn on the phone's WIFI setting, find the name: "wifi_camera_wifi30_xxx" and connect it.



Step 4. Then you can click the APP

Wide Compatibility

Wi-Fi and USB 2 in 1 connection



iPhone



Android



Tablet



Mac




Windows



Wi-Fi



USB cable

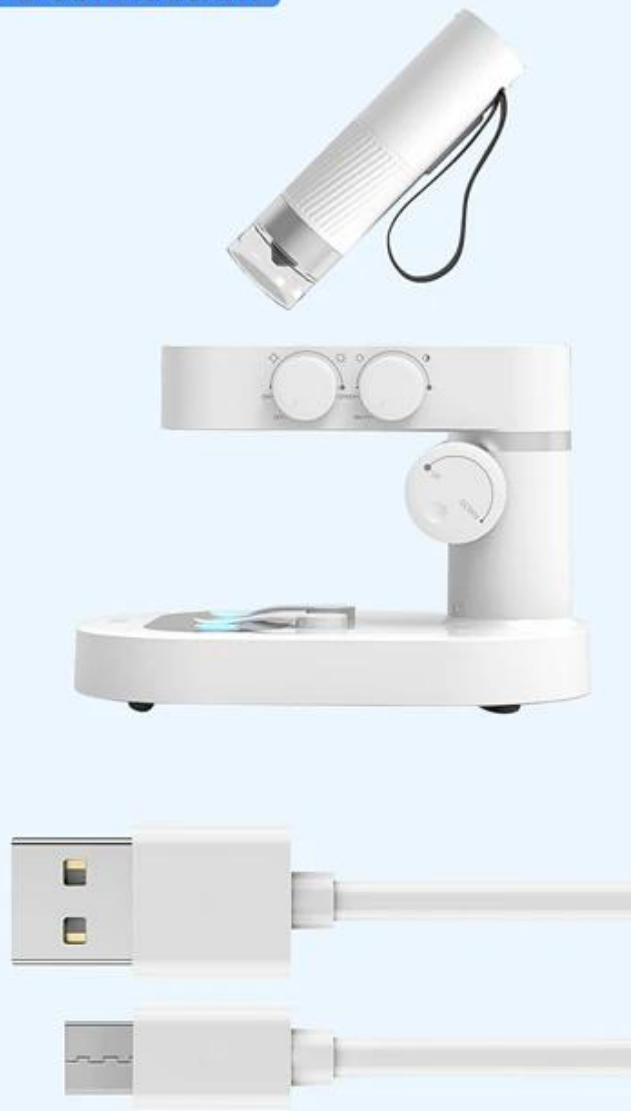



Упаковка и доставка

